

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



Ультразвуковий скрабер
Ultrasonic skin scrubber

ARHIMED
PureGlide
S7



Зміст

Характеристики приладу	1
Призначення та комплектація.....	2
Перед використанням.....	3
Режими та використання.....	4
Догляд та вирішення несправностей.....	5
Гарантія та сервіс.....	6

1

Характеристики приладу

Характеристика	Опис
Модель	ARHIMED PureGlide S7
Частота ультразвуку	29 000 Гц (забезпечує глибоке та безпечне очищення)
Основні режими	SONIC, ION+, ION-, EMS lifting
Світлотерапія (LED)	RED light , BLUE light
Призначення	Очищення пор, пілінг, зволоження, ліфтинг, лікування акне
Живлення	Акумулятор 300 mAh

2 Призначення та комплектація

Дякуємо за вибір ARHIMED PureGlide S7. Це сучасний ультразвуковий скрабер для домашнього догляду за шкірою обличчя.

Прилад поєднує функції очищення, покращення проникнення косметичних засобів, мікрострумового догляду та світлотерапії, допомагаючи підтримувати шкіру чистою, доглянутою та більш свіжою на вигляд.

Перед першим використанням уважно ознайомтеся з інструкцією, щоб правильно підготувати шкіру, обрати потрібний режим і отримати максимальний результат від процедури.

► Принцип роботи

Ультразвуковий скрабер ARHIMED PureGlide S7 працює за рахунок високочастотних коливань металевої насадки. Під час контакту зі шкірою та вологим середовищем ці коливання створюють мікровібрації, які допомагають м'яко відокремлювати ороговілі клітини, надлишок себуму та поверхневі забруднення.

Під час руху по шкірі прилад сприяє очищенню поверхні обличчя та зони пор без грубого механічного тертя.

За правильного використання шкіра стає чистішою, гладкішою та краще підготовленою до подальшого догляду.

- **Режим SONIC** використовується для базового ультразвукового очищення.
- **Режим ION+** допомагає глибшому очищенню забруднених ділянок.
- **Режим ION-** застосовується після очищення для кращого проникнення сироваток, гелів та інших доглядових засобів у шкіру.
- **Режим EMS lifting** забезпечує легкий стимулювальний вплив на шкіру та м'язи обличчя.
- **Режими RED light і BLUE light** використовуються як додатковий світловий догляд: червоне світло підходить для відновлювального та антивікового догляду, а синє — для шкіри, схильної до запалень.

Для отримання найкращого результату використовуйте кожен режим за призначенням, не натискайте насадкою надто сильно та не затримуйте її довго на одній ділянці.

► **Комплектація**

Перед першим використанням перевірте наявність усіх складових комплекту:

- Ультразвуковий скрабер ARHIMED PureGlide S7
- Зарядний пристрій
- Інструкція користувача

УВАГА: Якщо одного з елементів комплекту немає або будь-який елемент має пошкодження, не використовуйте прилад до повної перевірки комплекту.

3 Перед використанням

Використовуйте прилад лише за призначенням і тільки на чистій шкірі обличчя.

Не використовуйте прилад, якщо шкіра подразнена, пошкоджена, запалена або має ознаки інфекції.

Не використовуйте прилад без консультації лікаря, якщо у вас є кардіостимулятор, електронні імпланти, епілепсія, онкологічні захворювання, вагітність або підвищена чутливість до апаратних процедур.

ЗАБОРОНЕНО: Не використовуйте прилад у зоні очей, на слизових оболонках, на відкритих ранах і на сильно подразненій шкірі.

УВАГА: Не користуйтеся приладом, якщо корпус, насадка, індикатор або роз'єм для зарядки мають пошкодження. Не підключайте зарядний пристрій вологими руками.

► Елементи приладу



Кнопка керування: використовується для вмикання та вимикання приладу, а також для зміни режимів. Щоб вимкнути прилад, утримуйте кнопку приблизно 2 секунди.

► Підготовка до процедури

- Зарядіть прилад.
- Очистіть обличчя від макіяжу та забруднень.
- Вимийте руки.
- Підготуйте косметичний засіб відповідно до обраного режиму.
- Зніміть захисний ковпачок, якщо він передбачений конструкцією.
- Переконайтеся, що робоча насадка чиста.

БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ: Не починайте процедуру на сухій, брудній або подразненій шкірі. Перед увімкненням приладу переконайтеся, що насадка чиста, а на шкірі немає макіяжу, забруднень або засобів, які не підходять для обраного режиму.

Для досягнення максимального ефекту від використання ультразвукового скрабера рекомендується використовувати професійний засіб **ARHIMED Skin Lab HYDROGEL**.

Чому це важливо: ультразвукові хвилі не передаються через повітря — їм потрібне рідке середовище. Гідрогель забезпечує необхідний контакт між шкірою та приладом, допомагає насадці рухатися плавно та робить процедуру більш комфортною.

- **Максимальна провідність:** допомагає ультразвуковим імпульсам ефективно впливати на поверхню шкіри та зону пор.
- **Ідеальне ковзання:** зменшує тертя, захищає шкіру від зайвого розтягування та знижує ризик подразнення.
- **Глибоке зволоження:** підтримує вологість шкіри під час процедури та робить догляд більш комфортним.

Як використовувати: нанесіть гель середнім шаром на очищену шкіру безпосередньо перед процедурою. Працюйте скрабером лише по вологому гелю. Після завершення процедури змийте залишки гелю водою.

РЕКОМЕНДАЦІЯ: Для режимів ультразвукового очищення та процедур, де потрібне плавне ковзання насадки, використання гелю або іншого відповідного провідникового засобу є бажаним етапом підготовки.


4 Режими та використання

► Функція SONIC

Процедура забезпечує делікатне та ефективне очищення шкіри ультразвуком з м'яким відлущуванням ороговілих частинок, видаленням поверхневого бруду, чорних точок та підшкірного жиру.

Як це впливає на шкіру:

- Видаляє забруднення та ороговілі клітини епідермісу.
- Розкриває та очищує пори.
- Покращує метаболізм клітин.
- Позбавляє від токсинів.
- Ефективно видаляє чорні крапки (комедони) та запобігає появі висипань.
- Нормалізує виділення сальних залоз.

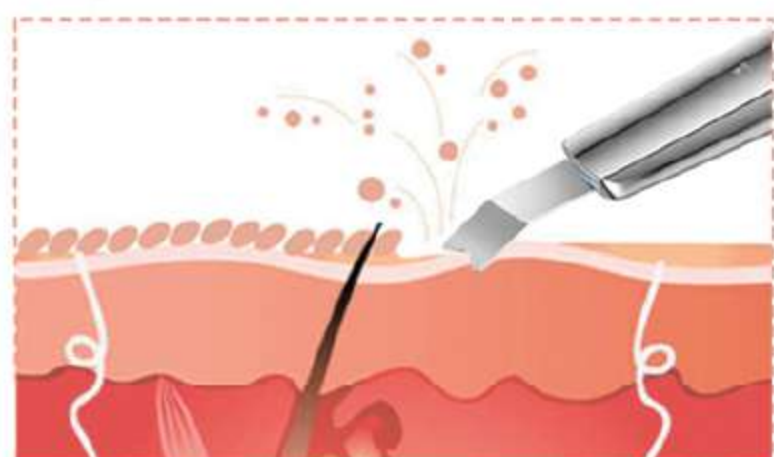

Як проводити процедуру:


1. Нанесіть гідрогель **ARHIMED skinlab HYDROGEL**, на шкіру.
2. Увімкніть режим «**SONIC**»
3. Розташуйте лопатку приладу під кутом **35-45** градусів, електродом вниз, проведіть чистку в напрямку масажних ліній.
4. Помірно рухайтеся від периферії обличчя до центру обличчя.

► Режим ION+ (Глибокий детокс та очищення пор)

Потужне поєднання ультразвуку та позитивних іонів (гальванічного струму). Цей режим працює як магніт: він розм'якшує щільні жирові пробки (чорні цятки) глибоко в порах і м'яко витягує їх на поверхню.

Як це впливає на шкіру:

- **Чисті пори:** ефективно видаляє чорні цятки та надлишки жиру.
- **Детокс та лімфодренаж:** виводить токсини, знімає набряки обличчя.
- **Матовість:** нормалізує виділення себуму (шкіра менше жирніє).

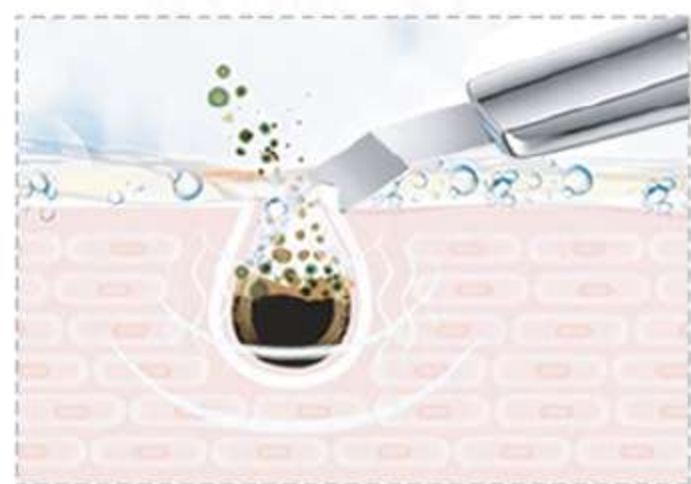

Як проводити процедуру:

1. **Чисті пори:** ефективно видаляє чорні цятки та надлишки жиру.
2. **Детокс та лімфодренаж:** виводить токсини, знімає набряки обличчя.
3. **Матовість:** нормалізує виділення себуму (шкіра менше жирніє).

Порада: Увімкніть паралельно RED light (червоне світло) — це додатково наситить шкіру киснем, вирівняє колір та прискорить регенерацію.

► Режим ION- (Максимальне зволоження та живлення)

Ваша сироватка може працювати в кілька разів ефективніше!

Режим ION- (іонофорез) працює як безпечний провідник:

за допомогою негативних іонів він буквально «насичує» корисні речовини з косметики глибоко в шкіру, забезпечуючи живлення на клітинному рівні.

Як це впливає на шкіру:

- **Супер-зволоження:** косметика проникає туди, куди не дістають звичайні креми.
- **Anti-age ефект:** стимулює вироблення колагену, помітно розгладжує зморшки.
- **Сяйво:** прискорює обмін речовин і регенерацію клітин.



Як проводити процедуру:

1. **Засіб:** Нанесіть на обличчя сироватку, живильний лосьйон або зволожувальну маску.
2. **Положення лопатки:** ПЕРЕВЕРНІТЬ прилад. Лопатка має ковзати по шкірі своєю пласкою стороною (гострий кут дивиться вгору).
3. **Твої рухи:** М'яко погладжуй шкіру від центру обличчя до країв (по масажних лініях). Не розтягуй шкіру, рухи мають бути плавними та приємними.

УВАГА ДЛЯ РЕЖИМУ ION-: Використовуйте лише відповідний доглядовий засіб. Не застосовуйте режим, якщо засіб викликає печіння, подразнення або алергічну реакцію.


► Режим EMS lifting (Фітнес для обличчя та підтяжка)

Мікрострумний ліфтинг — це безпечне тренування для м'язів вашого обличчя. Легкі електричні імпульси стимулюють м'язи, знімають спазми (які формують мімічні зморшки) та повертають шкірі пружність. Ефект підтяжки та свіжості помітний вже після першої процедури, а при регулярному використанні він накопичується!

Як це впливає на шкіру:

- **Чіткий контур:** підтягує овал обличчя, бореться з гравітаційним птозом (обвисанням).
- **Зняття набряків:** розганяє лімфу та покращує кровообіг.
- **Гладкість:** звужує пори та розгладжує зморшки.

Порада: Увімкніть паралельно світлотерапію: RED light — для потужного антивікового ефекту, або BLUE light — для додаткового звуження пор.

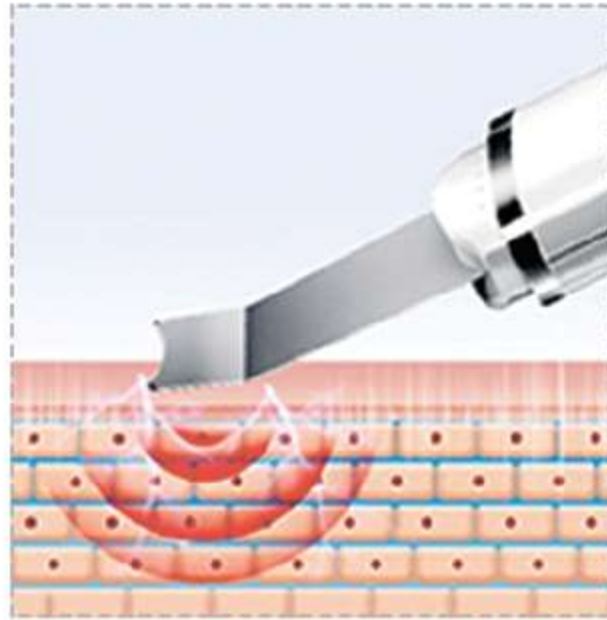

Як проводити процедуру:

- 1. Засіб:** Шкіра має бути добре зволоженою! Нанесіть гідрогель ARHIMED skinlab HYDROGEL, на шкіру. На сухій шкірі мікроструми не працюють.
- 2. Положення лопатки: ПЕРЕВЕРНІТЬ** прилад. Лопатка повинна лежати на шкірі плавною стороною (гострий кут дивиться вгору).
- 3. Твої рухи:** Рухайся по масажних лініях від центру до країв обличчя. Головне правило ліфтингу — ве́ди лопатку знизу вгору (від шиї до підборіддя, від підборіддя до вух), щоб підтягнути шкіру.

► RED light (Червоне світло: молодість та відновлення)

Червоне світло є найпотужнішим інструментом у фототерапії, який використовується для глибокого антивікового догляду та відновлення шкіри.

Технологія світла проникає у шкіру найглибше (на **4-5** мм). Воно працює як «**будильник**» для клітин-фібробластів, змушуючи їх активно виробляти новий колаген та еластин.

Доведено, що всього за **3** тижні регулярного використання цього світла зморшки стають менш помітними, а шкіра — більш пружною.

Як це впливає на шкіру:

- **Ефект ліфтингу:** розгладжує зморшки (до **-36%** за даними досліджень) та підвищує пружність шкіри.
- **Рівний тон:** висвітлює пігментацію, знімає почервоніння (навіть при розацеа).
- **Супер-догляд:** посилює дію будь-якого крему чи сироватки, покращуючи кровообіг.
- **Утримання вологи:** допомагає шкірі залишатися зволоженою зсередини.

Як використовувати:

Просто активуй червоне світло під час процедури зволоження (**ION-**) або мікрострумового ліфтингу (**EMS**).

Воно не гріє і не пече — ти нічого не відчуєш, але твої клітини отримають потужний заряд енергії для омолодження.

► **BLUE light (Синє світло: чиста шкіра без запалень)**

Терапія синім світлом — це безпечний та високоефективний метод лікування проблемної шкіри, схильної до акне та комедонів (чорних цятки).

Синє світло (400–510 нм) діє як безпечний природний антисептик. Воно проникає глибоко в пори і насичує їх киснем.

У такому середовищі бактерії, що викликають акне, просто не можуть вижити і швидко гинуть.

Як це впливає на шкіру:

- **Швидкий результат:** дослідження показують, що за перший тиждень кількість прищів скорочується на 30%, а чорних цяток — на понад 40%.
- **Безпечна дезінфекція:** вбиває мікроби без агресивного спирту, пересушування та шкідливого ультрафіолету.
- **Заспокоєння:** швидко знімає почервоніння, запалення та набряк навколо прища.
- **Чисті пори:** блокує появу нових комедонів та висипань.

Як використовувати:

Просто увімкни синє світло під час ультразвукової чистки (режими **SONIC** або **ION+**) або під час нанесення заспокійливої сироватки (режим **ION-**). Воно ідеально продезінфікує пори відразу після того, як ти видалиш з них забруднення.

5 Догляд, та вирішення несправностей

Проблема	Можлива причина	Рішення
Прилад не вмикається	Низький заряд	Зарядіть прилад
Насадка погано ковзає	Недостатньо засобу на шкірі	Додайте тонер, гель або сироватку
Є сильний дискомфорт	Надто сильний натиск або чутлива шкіра	Зменште натиск або припиніть процедуру
Шкіра почервоніла	Занадто довга обробка однієї ділянки	Зупиніть процедуру та дайте шкірі відновитися
Немає помітного ефекту	Обрано неправильний режим або шкіра підготовлена неправильно	Перевірте режим і повторіть процедуру за інструкцією
Прилад намок	Порушено правила очищення	Вимкніть прилад і не використовуйте до повного висихання та перевірки

► Очищення приладу

- Вимкніть прилад.
- Протріть робочу насадку м'якою сухою або злегка вологою серветкою.
- Не використовуйте агресивні мийні засоби.
- Не використовуйте спирт, абразиви або розчинники.
- Не мийте прилад під проточною водою.
- Не занурюйте прилад у воду.
- Не допускайте потрапляння вологи всередину корпусу.

ЗАБОРОНЕНО: Мити прилад під краном, занурювати у воду або залишати його у вологому середовищі.



► Зберігання

- Зберігайте прилад у сухому та чистому місці.
- Бережіть прилад від вологи.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Після очищення закрийте насадку ковпачком, якщо він передбачений конструкцією.

6 Гарантія та сервіс

Гарантійний термін — 3 роки від дати придбання.

Гарантія поширюється на заводські дефекти ультра-звукового скрабера ARHIMED PureGlide S7.

Гарантійні зобов'язання покривають виключно дефекти, що виникли з вини виробника, за умови правильного використання приладу відповідно до інструкції.

Гарантія чинна лише за умови звернення до уповноваженого сервісного центру.

Гарантійне обслуговування не поширюється на витратні матеріали, аксесуари та пошкодження, що виникли не з вини виробника.

Гарантійне обслуговування не надається у випадках:

- механічних пошкоджень приладу;
- неправильного використання або порушення вимог інструкції;
- використання приладу з невідповідною напругою живлення;
- несанкціонованого ремонту або технічних змін конструкції;
- використання приладу в комерційних цілях;
- пошкоджень, спричинених тваринами, комахами або гризунами.

Якщо в тебе є будь які питання по роботі приладу, або раптом щось не виходить скоріше дзвони або пиши нам у:



Viber

або



Telegram

+38 (073) 853 38 51

Підтримка, Сервіс, Гарантія

Скануй код та отримай відповідь на всі питання



@ARHIMEDCARE