



# ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Ультразвуковий скрабер

Ultrasonic skin scrubber

  
**ARHIMED**  
*PureGlide*  
*S7*



## ► Вітаємо із придбанням чудового девайсу!

Ви придбали інноваційний, сучасний і найголовніше - безпечний пристрій, для професійного догляду за обличчям **ArhiMED PureGlide S7**.

Ультразвуковий скрабер **ArhiMED PureGlide S7** – це раціональне рішення для якісного очищення шкіри та вирівнювання її поверхні. Процедура ультразвукового пілінгу відлущує шар ороговілих клітин, активізує мікроциркуляцію в тканинах, здійснюює клітинний мікромассаж, покращуючи всі обмінні процеси в тканинах.

## ► Принцип роботи

Під впливом ультразвукових хвиль деликатно очищає шкіру обличчя від акне та чорних цяток, вирівнюється колір шкіри, світліше стають пігментні плями. Шкіра стає гладкою, чистою, з вільними, очищеними порами та фолікулами.

Процедура чудово стимулює процеси відновлення тканин, прискорює обмінні процеси в клітинах шкіри, стимулює процеси синтезу колагену.

Ультразвуковий мікромассаж в імпульсному режимі, в поєданні з активними концентратами, забезпечує ефект ліфтингу, зменшує набряклість. Після ультразвукового пілінгу доступ до клітин шкіри вільний, тому легко можна вводити зволожувальні та живильні розчини, гелі, креми. Процедура ультразвукового мікромассажу шкіри та мімічних м'язів сприяє проникненню в шари дерми різних косметичних засобів, активізуючи кровообіг і обмінні процеси всередині клітин, перешкоджаючи "звичному м'язовому спазму", що формує зморшки.

## У комплексі з косметичними засобами прилад ефективно:

- Видаляє забруднення та ороговілі клітини епідермісу.
  - Делікатно очищає шкіру обличчя від акне та чорних цяток.
  - Істотно скорочує пори.
  - Сприяє зменшенню зморшок.
  - Підвищує еластичність, тонус та пружність шкіри обличчя.
  - Сприяє прискоренню кровообігу та покращенню лімфатичної циркуляції.
  - Прискорює метаболічні процеси та виведення токсинів із клітин шкіри.
  - Стимулює природну здатність клітин до регенерації.
  - Покращує колір обличчя та рельєф шкіри.
  - Нормалізує виділення сальних залоз.
  - Значно підвищує здатність клітин шкіри до поглинання поживних речовин.
  - Знижує набряклість обличчя та «кола» під очима.
  - Скорочує вікові зміни та прояви фотостаріння.
  - Сприяє зниженню кількості меланіну, що міститься в клітинах шкірних покривів, що сприяє незначному відбілюванню шкіри та зменшенню пігментації.
- З ультразвуковим апаратом для домашнього пілінгу **ArhiMED PureGlide S7** ви можете подарувати молодість шкірі без проведення дорогих процедур!

### ➤ Запобіжні заходи. Протипоказання

**⚠ Не рекомендується використовувати прилад у таких випадках**

- Тромбофлебіт;
- Наявність електрокардіостимулатора або інших електронних імплантатів;
- Онкологія;

- Гнійні запальні процеси, рани, подряпини на шкірі;
- Наявність металевих імплантатів, що розташовуються під шкірою або в м'язах (золоті нитки, металеві післяопераційні дужки) не поширюється на зубні коронки, штифти й брекети;

**⚠ Не можна проводити процедури за допомогою приладу на наступних зонах:**

- Очі, шия, ділянка над серцем та щитоподібною залозою, статеві органи, над силіконовими імплантами.

**⚠ Не допускається використання приладу:**

- Особами з паралічем лицевого нерва;
- Дітям;
- Особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з нестачею досвіду та/або знань;
- Не використовуйте пристрій на сухій, зневодненій шкірі;
- Не використовуйте прилад із сильними засобами для відлущування, що містять механічні частинки, що скрабують.

**⚠ Що не можна робити з приладом:**

- Не кидайте прилад, не завдавайте ударів, він може стати непридатним.
- Не намагайтесь самостійно модифікувати, розбирати чи ремонтувати пристрій.
- Не залишайте ультразвуковий скрабер у гарячому чи вологому середовищі.
- Не використовуйте прилад за наявності будь-якого пошкодження.
- З гігієнічних міркувань не передавайте ультразвуковий скрабер для користування іншим особам.

## ► Підготовка до процедури

- Перевірити пристрій: чи заряджений, щоб вистачило заряду на всю процедуру.
- Чи не має якихось механічних пошкоджень, якщо такі наявні, то утримайтесь від процедури.

### Початок процедури:

- Необхідно провести демакіяж в зоні, де проводиться процедура.
  - Очистити обличчя.
  - Провести холодну гідрацію, насичити клітини шкіри вологом: нанести гель або сироватку на водній основі, призначенну для ультразвукової процедури\*.
- \*рекомендованими косметологічними засобами є зволожувальні гелі з аloe vera, міцелярна вода або тонік.
- Вибрати потрібний режим і почати процедуру.

## ► Опис основних функцій




## ► Функція SONIC

Процедура забезпечує деликатне та ефективне очищення шкіри ультразвуком з м'яким відлущуванням ороговілих частинок, видаленням поверхневого бруду, чорних точок та підшкірного жиру. При ультразвуковому очищенні з використанням косметичних засобів, у поєднанні з технологією «Red light» (див. розділ Технологія RED & BLUE light), відбувається вплив високочастотних коливань (29 000 Гц) на косметичний засіб, попередньо нанесений на шкіру. Виникають «мікрострумені», що послаблюють зв'язки між мертвими роговими клітинами епітелію та сприяють їхньому швидкому видаленню.

- Видаляє забруднення та ороговілі клітини епідермісу.
- Розкриває та очищує пори.
- Покращує метаболізм клітин.
- Позбавляє від токсинів.
- Делікатно очищає шкіру обличчя від акне та чорних крапок.
- Нормалізує виділення сальних залоз.

### Проведення процедури:

- Нанесіть косметичний засіб, що очищає, на шкіру.
- Увімкніть режим «SONIC»
- Розташуйте лопатку приладу під кутом 35-45 градусів, електродом вниз, проведіть чистку в напрямку масажних ліній.
- Помірно рухайтесь від периферії обличчя до центру обличчя.

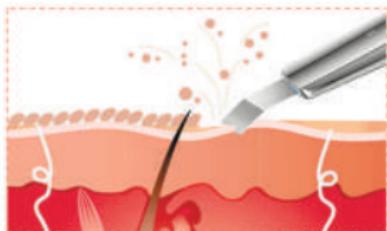

## ► Функція ION+

Делікатний вплив на шкіру ультразвуковими хвилями та постійним гальванічним струмом з позитивними іонами, видаляють забруднення та надлишки шкірного сала, а також ороговілі клітини епідермісу.

Ефект процедури залежить від використованого косметичного препарату. Ультразвуковий пілінг у поєднанні з технологією «**Red light**» дозволяє глибоко очистити шкіру і наситити її киснем. В результаті - вирівнюється колір шкіри та вона стає помітно молодшою. ION+ сприяє омолодженню шкіри, нормалізує pH, зменшує пористість шкіри, стимулює вироблення колагену та еластину, виводить токсини та вільні радикали, посилює регенераторні властивості шкіри, знімає подразнення та алергічні реакції.

- Дбайливо видаляє забруднення та ороговілі клітини епідермісу.
- Активуються обмінні процеси.
- Лімфодренуючий ефект.
- Зменшує набряклість обличчя.
- Насичення клітин киснем.
- Делікатне очищення від чорних точок та акне.
- Нормалізація виділення сальних залоз.

Проведення процедури:

- Нанесіть косметичний засіб, що очищає, на шкіру.
- Увімкніть режим «**ION+**»
- Розташуйте лопатку приладу під кутом 35-45 градусів, електродом вниз, проведіть чистку в напрямку масажних ліній.
- Помірно рухайтесь від периферії обличчя до центру обличчя.




## ► Функція ION-

Делікатний вплив на шкіру ультразвуковими хвилями та постійним гальванічним струмом із негативними іонами сприяє глибокому проникненню косметичних засобів у активні шари шкіри. У поєднанні з технологією «Blue light» (див. розділ Технологія RED & BLUE light), значно посилюється ефект від процедури. Шкіра добре зволожується, відбувається глибоке живлення на клітинному рівні, регенерація клітин, посилюються обмінні процеси, шкіра стає більш гладкою та рівною. Для ефективності даної процедури рекомендується використовувати поживні косметичні засоби, наприклад, з вітаміном С.

- Стимуляція клітин, які відповідають за вироблення колагену (фібробластів).
- Прискорюється обмін речовин.
- Покращується живлення клітин киснем.
- Значно підвищується здатність клітин тканин шкіри до поглинання поживних речовин.
- Помітне зменшення зморшок.
- Стимулюється природна здатність клітин до регенерації.

### Проведення процедури:

- Нанесіть живильний косметичний засіб на шкіру.
- Увімкніть режим «ION».
- Розташуйте лопатку приладу під кутом 35-45 градусів, електродом вгору.
- Помірно рухайтесь у напрямку масажних ліній від центру до периферії обличчя.

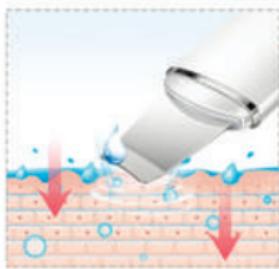


## ► Функція EMS lifting

Режим сприяє зменшенню пор, підвищенню еластичності та пружності шкіри, у поєднанні з технологією «Blue light» (див. розділ Технологія RED & BLUE light), сприяє скороченню зморшок та збереженню довгострокового ефекту підтяжки обличчя. У цьому режимі використання приладу присутній іонізувальний ефект. Тому для ефективності впливу процедури рекомендується використовувати косметичні засоби з позитивними іонами, наприклад, з вітаміном А.

- Має накопичувальний ефект.
- Помітний результат омолодження шкіри після першої процедури.
- Покращує мікроциркуляцію крові.
- Підвищує еластичність, тонус та пружність шкіри обличчя. Істотно скорочує пори.
- Скорочує вікові зміни та прояви фотостаріння.

### Проведення процедури:

- Нанесіть живильний косметичний засіб на шкіру.
- Увімкніть режим «EMS»
- Розташуйте лопатку приладу під кутом 35-45 градусів, електродом вгору.
- Помірно рухайтесь у напрямку масажних ліній від центру до периферії обличчя.

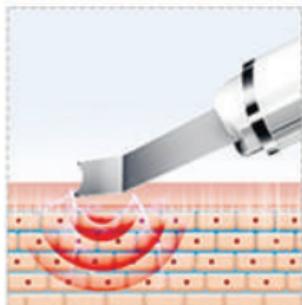

## ► Технологія RED & BLUE light

### LED-терапія червоним світлом (RED light)

Червоне світло у фототерапії використовується для антивікового догляду. Він має довжину хвилі 633 – 830 нанометрів та проникає у шари шкіри на глибину 4-5 мм. Така довжина хвилі дозволяє світлу дістатися фібробластів, що відповідають за вироблення колагену та еластину. Питання скорочення зморшок внаслідок червоного світла вивчено дуже ретельно, і численними дослідженнями доведено, що при регулярному використанні світлотерапії глибина зморшок значно скорочується, а шкіра стає більш пружною. Деякі дослідження показали дуже хороші результати, внаслідок чого зморшки зменшувалися до 36%, а еластичність шкіри підвищувалася до 19%. Крім того, червоне світло покращує циркуляцію крові, тим самим насичуючи клітини киснем та поживними компонентами.

### Чого чекати від LED-терапії червоним світлом:

- Стимулюється вироблення колагену та фотоомолодження шляхом поліпшення клітинного метаболізму.
- Прискорюється відновлення шкіри.
- Збільшується ефект активних інгредієнтів лікувальної косметики.
- Протягом 21 дня після дії на шкіру червоним світлом скорочення глибини зморшок та підвищення еластичності шкіри.
- Зменшується пігментації шкіри.
- Прискорюється синтез ДНК та РНК, що призводить до відновлення клітин шкіри.

P.S Червоне світло - найпотужніше з усіх. Зазвичай призначається для зрілої шкіри та поліпшення метаболізму та кровообігу. Воно значно підвищує здатність шкіри утримувати вологу та надає заспокійливу дію. Також зменшує почервоніння та запалення. Червоне світло пройшло медичну атестацію на лікуванні розацеа.

## **LED-терапія синім світлом (BLUE light)**

Терапія синім світлом спрямована на лікування акне та комедонів, тому що бореться з однією з найпоширеніших причин висипань – бактерією *Propionibacterium acne* (живе в заблокованих порах та живиться жирними кислотами себуму). Знищенння бактерій відбувається шляхом насичення шкірою киснем. Синє світло випромінює хвилі короткої довжини (400 - 510 нанометрів), в спектрі хвиль знаходиться поряд з ультрафіолетом, що наділяє його тими ж антибактеріальними властивостями, але сині хвилі набагато безпечніші за ультрафіолетове випромінювання. Гарні результати така терапія показала на шкірі людей зі слабкою та середньою формою акне – вже за тиждень щоденної терапії кількість чорних точок може зменшитись на 41.5%, а висипів – до 30.4%.

### **Чого чекати від LED-терапії синім світлом:**

- Допомагає запобігти появі нових висипань.
- Насичення клітин шкіри киснем та поживними інгредієнтами завдяки покращеному кровообігу.
- Має антибактеріальний ефект.
- Зменшення запалень на шкірі.
- Запобігання появі чорних точок.

P.S Синє світло - найефективніше для боротьби з бактеріями та псоріазом. Воно ефективно усуває запалення, тому його часто використовують при лікуванні шкіри, склонної до акне та висипів. Лікування синім світлом допомагає запобігти новим висипанням і бактеріальній інфекції шкіри в майбутньому.

## ➤ Очищення приладу

- Перед початком очищення переконайтесь, що пристрій вимкнено.  
Не занурюйте прилад у воду. Не допускайте потрапляння води всередину приладу це може привести до ламання.
- Очищайте корпус пристрою та ультразвукову лопатку за допомогою чистої сухої тканини або вологої тканини (злегка змоченою водою).
- Для дезінфекції ультразвукової лопатки протріть її спиртовою серветкою або тканиною змоченою антисептиком.
- Для догляду за пристроєм не використовуйте жодних змащувальних, миючих, полірувальних засобів, а також освіжувач повітря.
- Не мийте ультразвукову лопатку під струменем води. Це може привести до ламання приладу.
- Після очищення висушіть прилад за допомогою сухої м'якої тканини.



## ► Гарантійні зобов'язання

- Гарантія на ультразвуковий скрабер ArhiMED PureGlide S7 складає 2 роки, починаючи з моменту придбання виробу (дата придбання вказана у гарантійному талоні).
- Ця гарантія втрачає чинність, якщо ремонт здійснюється не уповноваженою для цього особою.
- Протягом гарантійного періоду будь-які заводські дефекти усуваються безкоштовно шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу.
- Гарантія набуває чинності лише якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на гарантійному талоні.
- Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.
- У разі пред'явлення reklamaції за умовами даної гарантії, передайте виріб у повному комплекті разом з гарантійним талоном у сервісний центр ArhiMED.
- Усі інші вимоги, разом із вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним шляхом.

### Випадки, на які не розповсюджується гарантія

- 1) Ушкодження викликані неправильним користуванням.
- 2) Дефекти, викликані форс-мажорними обставинами.
- 3) Використання з метою отримання прибутку.
- 4) Порушення вимог інструкції з експлуатації.
- 5) Здійснення технічних змін у конструкцію приладу.
- 6) Механічні ушкодження.
- 7) Пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (у тому числі у випадках знаходження комах у середині приладу).
- 8) Проникнення рідини всередину виробу.

Якщо в тебе є будь які питання по роботі приладу,  
або раптом щось не виходить - скоріше дзвони або  
**пиши нам у**



Viber

або



Telegram

 **+38 (073) 853 38 51**

Підтримка, Сервіс, Гарантія

Відділ турботи ArhiMED допоможе ❤